


# タッピング式 密充填カサ密度測定器

TVP-1形, TVP-3形 (定容量形)

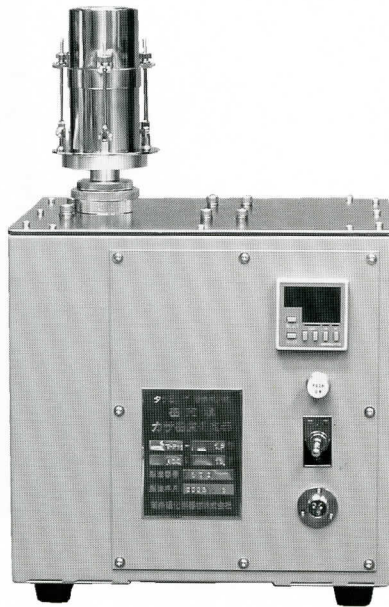

TVP-1 P形

本器はタッピングにより試料容器を振盪させ、粉体試料をかたく密充填にする装置です。試料容器 (100ml) の上に接続用円筒杵 (約100ml) を重ねサンプルを充填し、一定回数のタッピングを行い、円筒杵をはずし重量を測定し密充填カサ密度を算出します。サンプルの特性によりタッピング巾を変えられますので、種々の試料に対応して測定できます。粉体製品の検査、管理の試験用として最適です。

疎充填カサ密度測定器 (MVD-86形) と併用することにより、圧縮度 (圧縮率) が求められ、流動性の判定の重要な値となります。

## 仕 様

形 式	TVP-1形	形 式	TVP-3形
寸 法	W280×H400×D220mm 10kg	寸 法	W410×H400×D220mm 15kg
タッピング巾	20~60mm 可変	タッピング巾	20~60mm 可変
タッピング数	30回/分(50Hz)、36回/分(60Hz)	タッピング数	30回/分(50Hz)、36回/分(60Hz)
試料容器	SUS製 100ml 円筒杵 1組 スリ切りヘラ 1本	試料容器	SUS製 100ml 円筒杵 3組 スリ切りヘラ 1本
カウ ン タ	4桁表示	カウ ン タ	4桁表示
電 源	100V 50/60 Hz 15W	電 源	100V 50/60Hz 25W
◎ プリセットカウンター (回数自動停止装置) もオプションであります。御指示ください。			

18.10. 2,000(S)

## 筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31  
 ☎03(3845)2011(代) FAX03(3842)5852  
 E-mail:tsutsui@ff.ij4u.or.jp  
 URL:http://www.e-tsutsui.com

特約店