


ふるい振とう機

300-MM2形

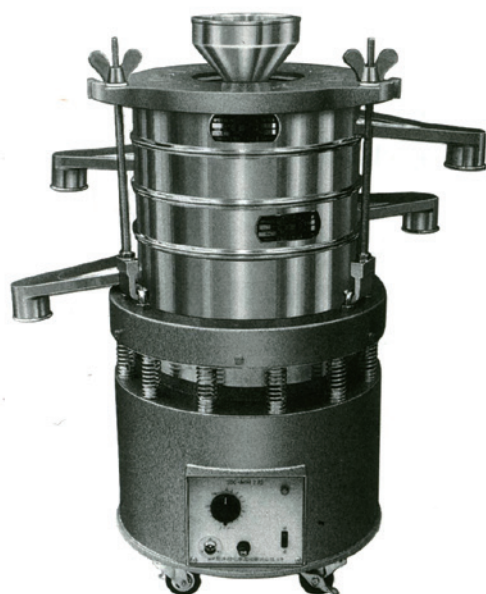

仕様

形 式	300-MM2形	
ふるい	排出口付ステンレスふるい	
	300mmφ×60mm	3ヶ掛(受不含)
	300mmφ×100mm	2ヶ掛(受不含)
	(300mmφ試験篩にも使用できます)	
振動数	特殊振動モーターによる	
	モーター回転数 3000RPM(定回転)	
振幅	約5mm(無負荷時)	
処理量	1kg~30kg/H(サンプル粒度による)	
電 源	100V 250VA	
タイマー	0~30分 連続(ゼンマイ式)	
寸 法	385mmφ×高さ 415mm	
重 量	40kg キャスター付	
付 属 品	支持蓋	1ヶ
	ネジ付締金具	3本

特 長

本機は300-MM形試験ふるい振とう機を小規模の生産用として使用できるように改良開発したふるい振とう機です。

連続的に使用できるように、耐久性のある特殊振動モーターを使用し、一定振動で長時間効率よいふるい分けができます。ホッパー付蓋、排出口付ふるい、排出口付受皿を組合せ連続的に粉粒体を数段にふるい分けできますので少量の分級に適合します。

JIS 300mmφ試験篩も使用できますので粒度測定用として、試験研究用に使用できます。

- ◎ 排出口付ふるいを使用した場合は、粉粒体、使用ふるいの目開きにより目的の分級ができない場合もあります。
- ◎ 排出口付ふるいはJIS 300mmφ試験ふるい(JIS Z-8801 別紙カタログ参照)に排出口を取り付けたふるいです。目開を御指示ください。
- ◎ ふるい段数によりネジ付締金具の長さが違います。御指示ください。

※改良のためお断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

14.10. 2,000 (W)

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31
 ☎ 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852
 E-mail: tsutsui@ff.ij4u.or.jp URL: http://www.e-tsutsui.com

特約店