




Powder Consultant
TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co., Ltd.

筒井理化学器械株式会社

200φ試験ふるい用卓上型ふるい振とう器
Desktop type Sieves shaker for φ200 Sieves

VSS-50D

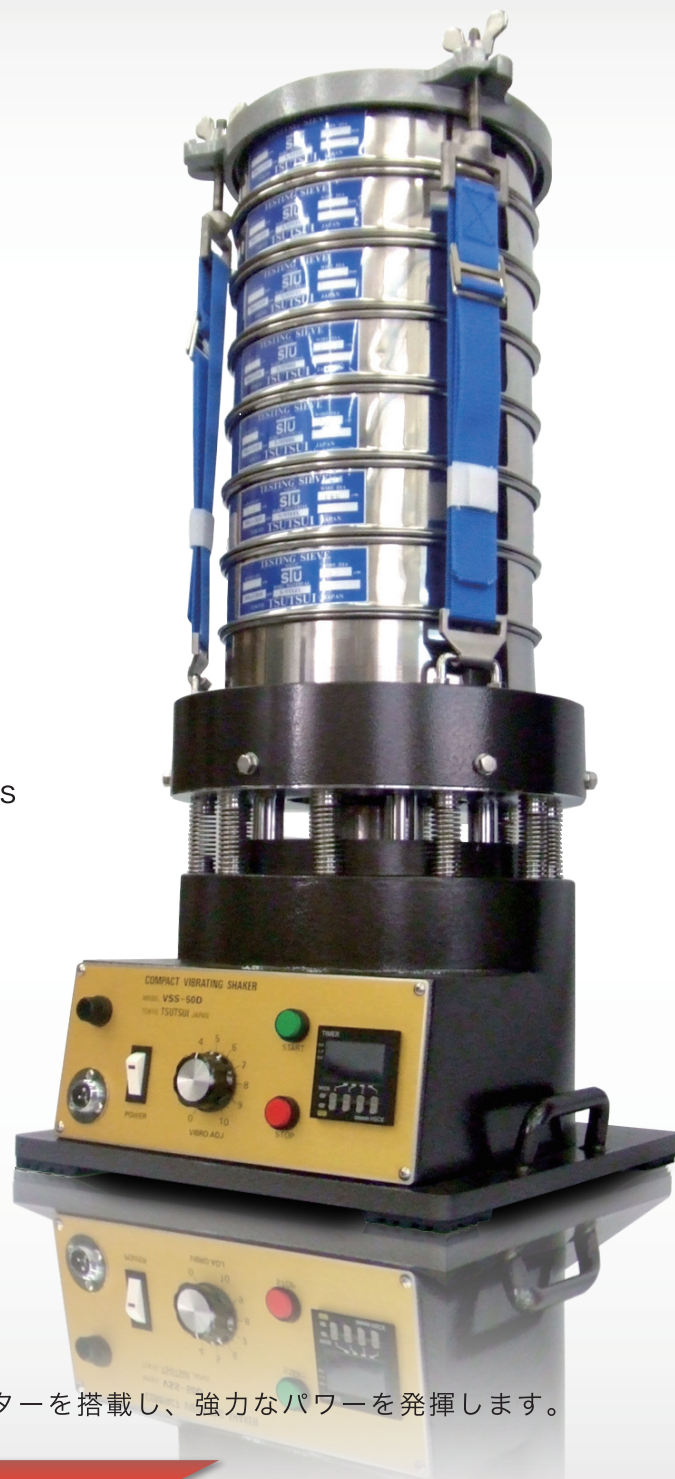

Compact & Strong

コンパクトかつ強力

卓上サイズのコンパクトボディに特殊振動モーターを搭載し、強力なパワーを発揮します。

Vibration & Gyration

バイブレーション(振動)とジャイレーション(旋回)

振動と旋回による複合運動で様々なサンプルを効率よく分級します。

Vibration Control & Digital Timer

振動調節コントローラーとデジタルタイマー

操作パネル中央に取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルに合わせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。

形式	VSS-50D	振幅	0~1mm
適用ふるい	試験用ふるい (JIS-Z8801)	加速度	12~30G
	200mmφ×深さ60mm	モーター	特殊振動モーター 100V 60W
	200mmφ×深さ45mm		
	150mmφ×深さ60mm	デジタルタイマー	秒単位設定 最大設定時間 99分59秒
	150mmφ×深さ45mm		
	ニューテストニングシープ (ナイロン網ふるい)	寸法	W300mm×D300mm×H300mm
	200mmφ×深さ45mm	重量	22Kg
振動数	1,000~6,000回/分(無負荷時) 無段調節コントローラー付	電源	100V 100VA
		付属品	鋳物蓋 1枚 締付ベルト 3本 蝶ねじハンドル 1個

操作パネル



関連製品

- ▷ 排出口付受け器、ホッパー付き蓋
湿式分級や連続分級の際にご利用下さい。
- ▷ Oリング
湿式分級の際にふるい枠の内側に取り付けてご使用下さい。
- ▷ ブラシクリーナー、ノブクリーナー
ふるいの中に投入することにより目詰まりを減らし、分級効果をアップします。



【ご注意】

- ※ 本製品にふるいは付属しておりません。
- ※ 150mmφふるいを使用する場合、および湿式分級を行う場合はそれぞれ専用のアダプターが必要になります。
- ※ ふるい段数が3段以下の場合は固定ベルトがかかりません。ロッドタイプをご購入下さい。
- ※ 超微粉(約45μm以下)の場合は音波ふるい器(SW-20AT)の使用をご検討下さい。

